
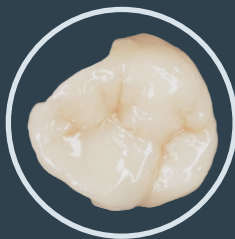



SAREMCO

saremco print CROWNTEC

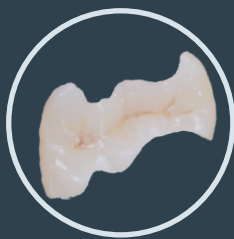

BIO **ENTALES**
DE COLOMBIA LTDA.

SAREMCO

CROWNTEC

RESINA 3D DEFINITIVA

Resina compuesta de excelente calidad para la fabricación de Restauraciones Definitivas altamente biocompatibles.

Tipo Resina Compuesta

Matriz 4,4'-isopropildifenol esterificado y ácido 2-metilprop-2-enoico

Relleno 30-50 % en peso vidrio dental silanizado y sílice pirogénica (0,7 μm)

Polymerización Iniciadores, 1,5 mm de profundidad de curado



Rentable

Restauraciones 3D Definitivas:
Coronas, Carillas, incrustaciones.

Alta Resistencia a la Flexión

Alta Precisión de Fabricación

Comportamiento de Mínima Fatiga

Sin Brecha Marginal



Sin Premezcla, Lista para Usar

La Resina 3D tiene una Vida Útil de 4 años en Estantería

Certificada Globalmente

Más De 120 Publicaciones Científicas

Validado en Múltiples Sistemas

Perfecta Combinación Estética

Excelente Biocompatibilidad



Proceso de Producción



Escaneo



Diseño CAD



Impresión 3D



Producción



Limpieza



FotoCurado



Restauración Final



CROWNTEC

RESINA 3D DEFINITIVA

- Para prótesis dentales
- Para coronas permanentes, incrustaciones inlay, onlays y carillas
- Material monofásico altamente estético con una opacidad perfectamente adaptada
- Excelente biocompatibilidad: sin sustancias eluibles en un entorno acuoso
- Listo para usar tras un tiempo mínimo de agitación
- Posibilidad de tinción personalizada con Saremco Els Paintart*

Datos Técnicos:

Consistencia

Color

Profundidad de curado (DIN EN ISO 4049)

Flexural strength (DIN EN ISO 4049)

E-Modulo (DIN EN ISO 4049)

Dureza de Barcol

Dispositivo Médico

Líquido homogéneo de viscosidad media

De acuerdo con el estándar VITA®
(A1, A2, A3, A3.5, B1, nieve (blanqueador))

≥ 1.5 mm

> 135 MPa (Promedio)

> 4000 MPa

> 40

Clase IIa



SAREMCO

Referencias: (500g)

REF	Product Description
8063	CROWNTEC, A1
8052	CROWNTEC, A2
8051	CROWNTEC, A3
8065	CROWNTEC, B1
8066	CROWNTEC, SW (bleach-color)

Los siguientes tonos bajo pedido:

A3.5, A4, B2, B3, C3, C4, D3



More information: www.saremco.ch